

COLLAR KEEPER・HARD COLLAR KEEPER・me

カラーキーパー・ハード
カラーキーパー・me（メッシュタイプ）

〈頸椎固定用シーネ〉 —— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みにになれるよう大切に保管してください。

用 途

頸部の固定

特 長

カラーキーパー・ハード

- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式を使用しており、固定力を維持します。
- 取り外し可能な2枚のシートを上下にずらすことで、高さの微調整ができます。
- 本体に通気孔を設け、通気性を持たせています。

カラーキーパー・me


- 面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式を使用しており、固定力を維持します。
- 取り外し可能な2枚のシートを上下にずらすことで、高さの微調整ができます。
- 本体にメッシュ素材を使用しており、通気性に優れています。


はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は頸部の固定を目的としていますが、必ずしも完全に固定できるものではありません。
- 本使用説明書は、カラーキーパー・ハードおよびカラーキーパー・me（メッシュタイプ）に共通です。
- 使用する前にサイズが合っているかどうか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。
- 本使用説明書のイラストでは、説明をわかりやすくするため、製品の色を白黒2色で表現しています。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告**……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意**……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 頸部以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください（サイズ表は本使用説明書のP.8にあります）。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 長時間装着する場合は、長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などのおそれがありますので、適宜装着し直してください。
- 上下、表裏、前後を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- 本体をきつく締めすぎないでください。
- 使用中にたるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから、正しく装着し直してください。





警告

- 摩耗・損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。

本品の使用中に次の異常が発生したら、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると、症状が悪化する原因となります。

- つけごちが悪いなど違和感がある場合。
- 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。



注意

面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。



お手入れ方法

- 本品は洗濯できません。本品が汚れた場合には、濡らして固くしぼった布などで汚れをふき取ってください。薬品などの使用は、本品をいためる原因となりますので使用しないでください。
- 乾燥機での乾燥、ドライクリーニングは行わないでください。また、アイロン、塩素系漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。

各部の名称

<カラーキーパー・ハード>

<カラーキーパー・me (メッシュタイプ)>

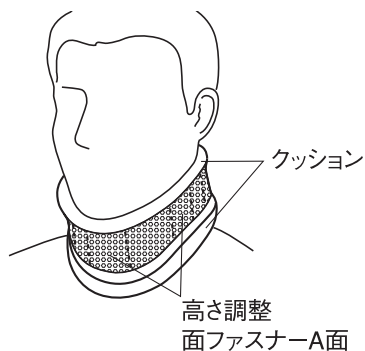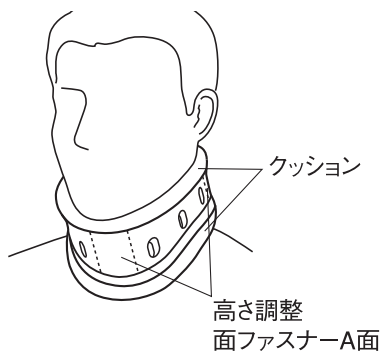


カラーキーパー・ハード

【製品の表側】

本体上部


本体下部

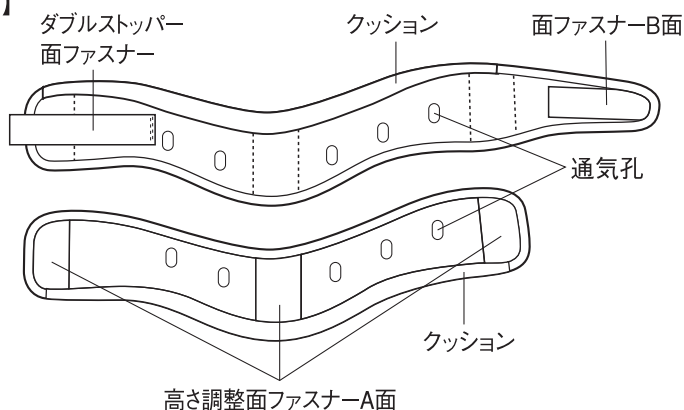

【製品の裏側】

本体上部

本体下部

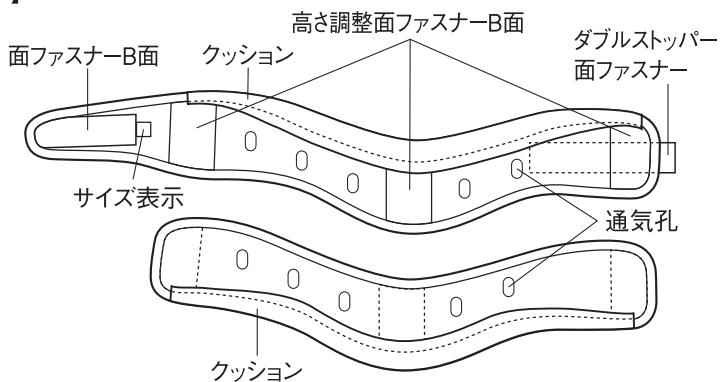


カラーキーパー・me (メッシュタイプ)

【製品の表側】

本体上部


本体下部

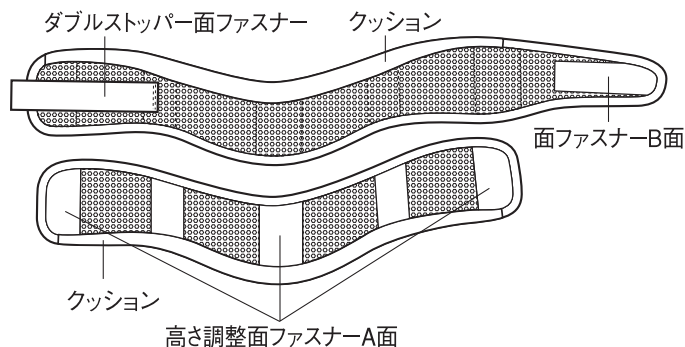

【製品の裏側】

本体上部

本体下部

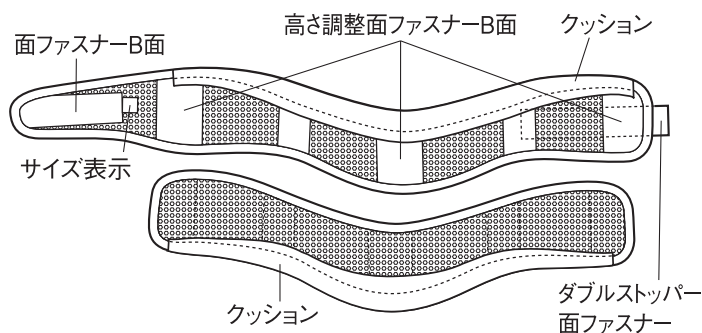

装着手順


- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意-必ずお読みください-】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 装着手順ではカラーキーパー・ハードを示していますが、カラーキーパー・me (メッシュタイプ) も同様に装着してください。

1


製品本体の面ファスナーをすべて取り外します。

本品は中央にへこみのある方が上で、サイズ表示がある方が裏側（肌に当てる側）になります。


【製品の表側】

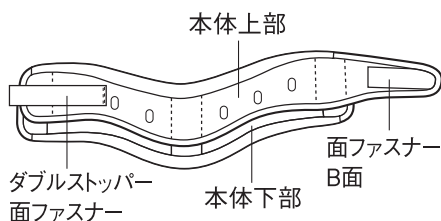


【製品の裏側】

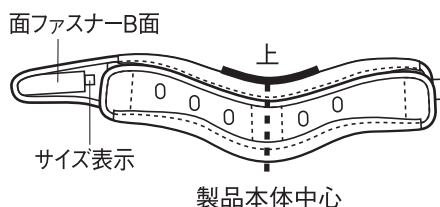


- 2** 高さが合っているか確認してください。高さが合わない場合は、高さ調整面ファスナーを取り外し、調整します。

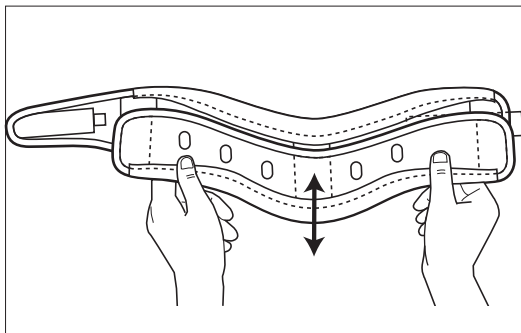


- 3** 製品本体中心のへこみ部分にあごを合わせます。

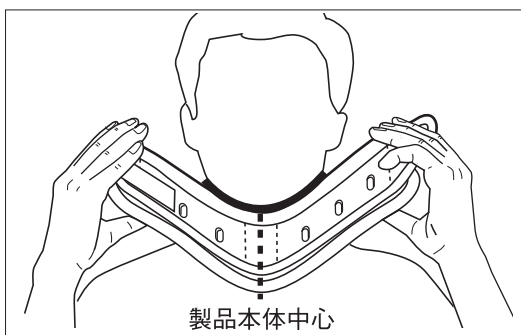


- 4** あごが本体の上をしっかり乗るように首に巻きます。

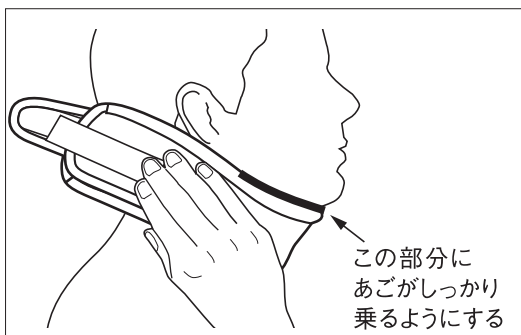

- 5** ダブルストッパー面ファスナーを広げ、面ファスナーB面をとめます。

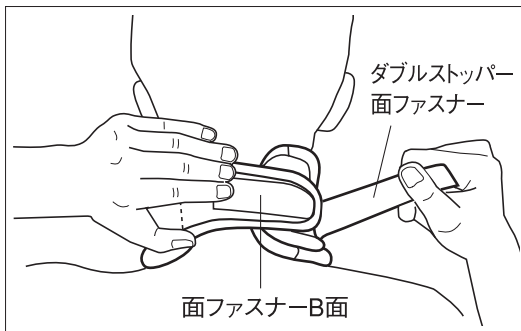


- 6** 面ファスナーB面の上にダブルストッパー面ファスナーを重ねてとめます。

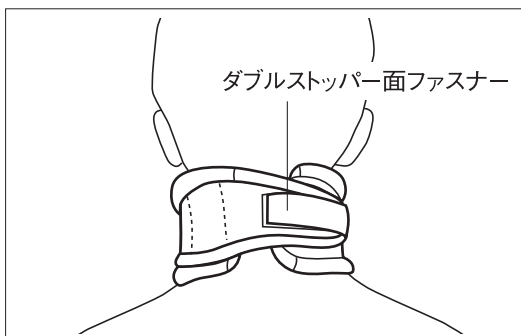


- 7** 本体のゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度始めから装着し直してください。


装着完了時 (カラーキーパー・ハード の場合)

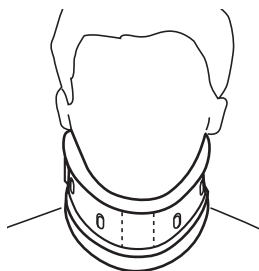

【前から見た図】

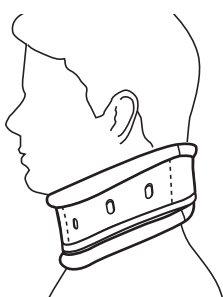


【横から見た図】

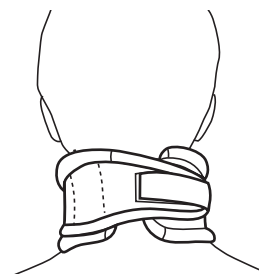


【後ろから見た図】


装着完了時 (カラーキーパー・me(メッシュタイプ)の場合)

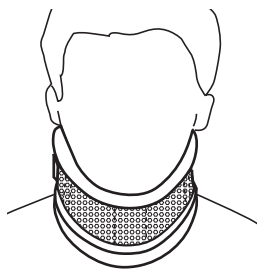

【前から見た図】

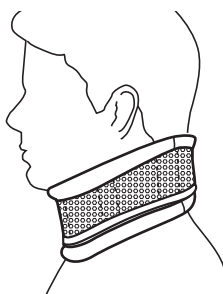

【横から見た図】

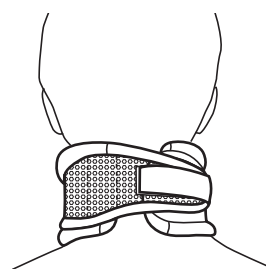

【後ろから見た図】

品質表示

<カラーキーパー・ハード>

素 材	
繊維	ナイロン、綿
その他(繊維外)	ポリエチレン、合成皮革

<カラーキーパー・me(メッシュタイプ)>

素 材	
繊維	ナイロン、綿
その他(繊維外)	ポリエステル、ポリエチレン、合成皮革

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

サイズ	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数
S	30cm～35cm	8.0cm～ 9.5cm	1コ
M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm	1コ
L	40cm～45cm	8.0cm～ 9.5cm	1コ

●サイズの選び方

首回りに合わせて選んでください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、高さの合う方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良等お気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社 〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3230